
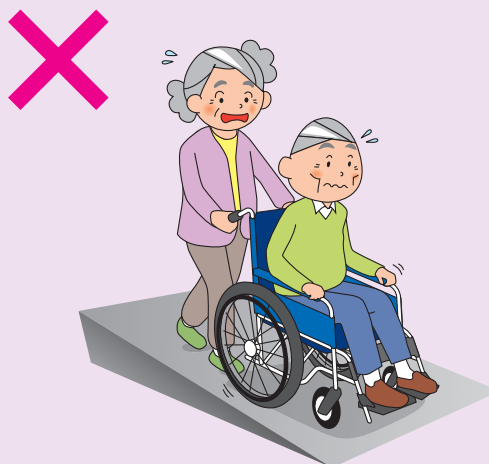


## スロープの走行における注意点

降りる時は、介助者が後ろ向きになり、支えるように降りましょう。

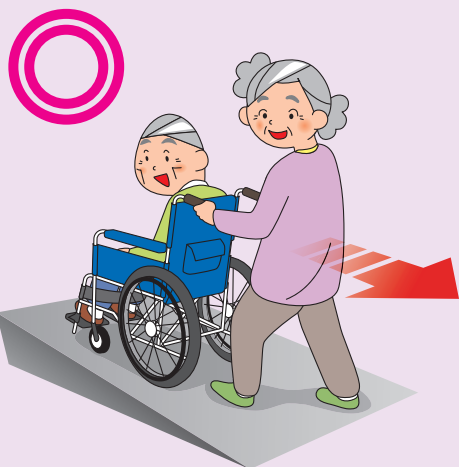

## スロープの選び方

※適用傾斜角度は車椅子の種類やご利用者、介助者の体力等により変化します。下記表は目安としてお使いください。  
※段差に対し最低でも4倍以上の長さのスロープをお使いください。

| 段差の高さ              | 5cm | 10cm | 15cm | 20cm | 25cm | 30cm | 35cm | 40cm | 45cm | 50cm | 60cm | 70cm |
|--------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 歩行器                |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| スロープ               |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 移動用<br>リフト・<br>つり具 |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 介護保険<br>購入<br>対象品  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 販売品                |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

傾斜角度 5°未満

傾斜角度 10°未満


傾斜角度 10~15°未満

自分で進む

誰かが押してくれる

押してくれる人が  
限界の角度


でも5°は  
きつい~!

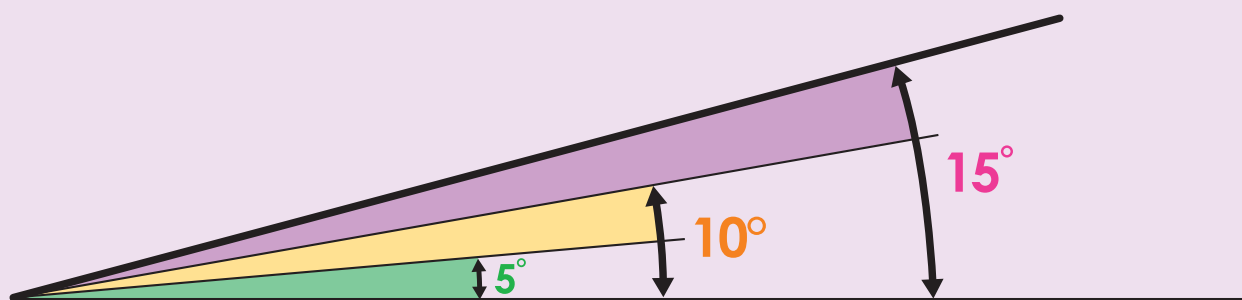

## ケアスロープ

ケアメディックス

材質:FRP+アルミ

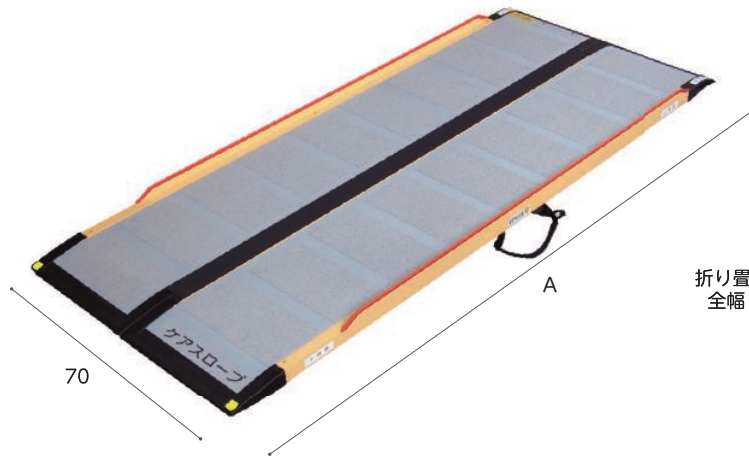

折り畳み時  
全幅 35



床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具


介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

| 商品名     | A(cm) | 重さ(kg) | 商品番号      | 商品コード        | ご利用者負担額(1割) | ご利用者負担額(2割) | ご利用者負担額(3割) | 月額レンタル料金 |
|---------|-------|--------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| CS-65   | 65    | 約3     | 28-0979-1 | 00093-000015 | 円           | 円           | 円           | 円        |
| CS-100  | 100   | 約5     | 28-0980-1 | 00093-000016 | 円           | 円           | 円           | 円        |
| CS-120  | 120   | 約6     | 28-0981-1 | 00093-000017 | 円           | 円           | 円           | 円        |
| CS-150  | 150   | 約8     | 28-0982-1 | 00093-000018 | 円           | 円           | 円           | 円        |
| CS-175  | 175   | 約9     | 28-0983-1 | 00093-000019 | 円           | 円           | 円           | 円        |
| CS-200  | 200   | 約10    | 28-0984-1 | 00093-000020 | 円           | 円           | 円           | 円        |
| CS-240C | 240   | 約12    | 28-1015-1 | 00093-000021 | 円           | 円           | 円           | 円        |
| CS-285C | 285   | 約15    | 28-1092-1 | 00093-000038 | 円           | 円           | 円           | 円        |

### STEP 1

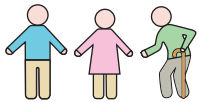

- ・ 介助者の状況を確認し、選定してください。
- ・ 段差の高さを確認し、スロープの長さだけでなく角度も含めて選定してください。

老老介護の場合 推奨角度8°  
スロープの長さ  
||  
段差の高さ × 8倍以上

#### ケアスロープ選定理由例

《CS-175》  
玄関に約20cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能であり、転倒を防止し介助負担を軽減するために選定。

《CS-240C》  
玄関に約30cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能で脱輪防止エッジがあり車椅子が安全に移動できるスロープとして選定。

### STEP 2

- ・ 日本家屋に多い狭い間口・場所でも設置可能な、幅狭設計です。




- ・ 下部部までエッジが無いので、狭い場所で車椅子が直角に乗り入れしやすい設計です。

- ・ アルミ製脱輪防止エッジにより衝撃に強く、丈夫で安全に走行することができます。

### STEP 3

- ・ 収納しやすい自立設計です。
- ・ 様々な段差に応じて長さを選択できる豊富なラインナップを取り揃えております。

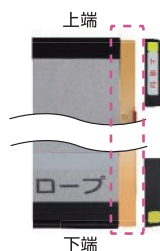

- ・ スロープの先端までアルミ加工を施すことにより、設置時にしっかりと固定できます。

### STEP 4



- ・ 設置の際は必ず先端が4cm以上かかっていること、ガタツキがないこと、走行面に異物がないことを確認したうえでご使用ください。

- ・ 走行面にソフトなすべり止めを採用しているため、室内使用時にスロープの上を裸足で歩いても痛くありません。



## ダンスロープ ライト・スリム

R-85SL 材質：グラスファイバー FRP  
R-125SL～R-285SL：カーボンファイバー FRP

ダンロップホームプロダクツ

より軽く、より安全なスリム設計のスロープです。エッジ（高さ3.5cm。R-85SLは高さ2.5cm）により脱輪の危険性を低減。  
※製法上サイズに若干の誤差が生じる場合がございます。

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器


車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ


移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

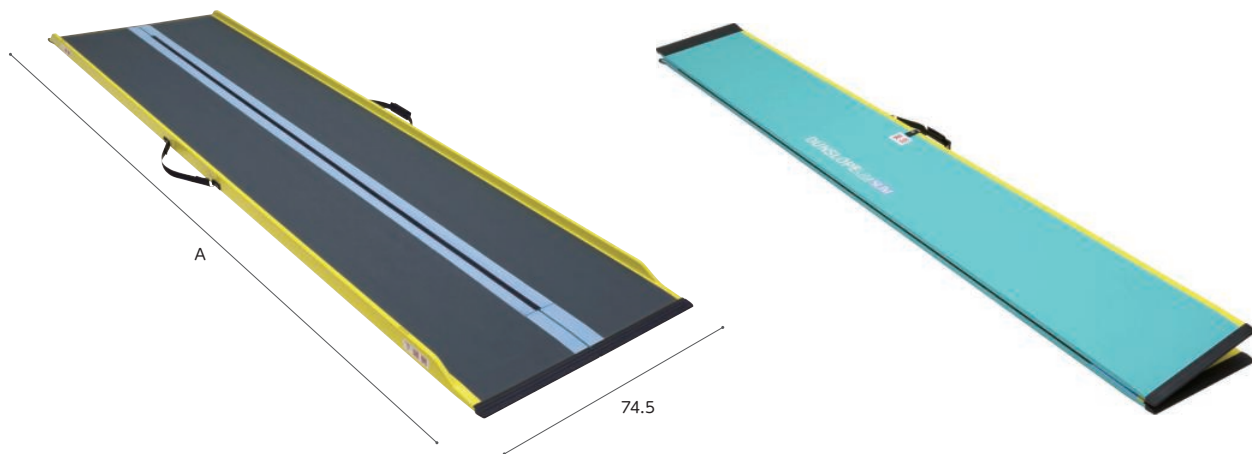

フックハンド付

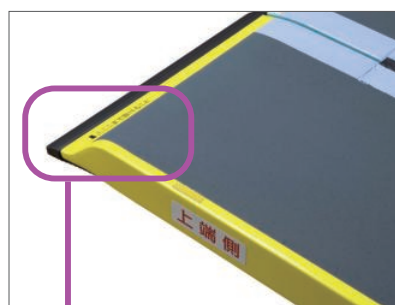

「ここまで掛けること」



全幅 38cm

折り畳み時



使用時


情報

| 商品名     | A(cm) | 重さ(kg) | 商品番号      | 商品コード        | ご利用者負担額(1割) | ご利用者負担額(2割) | ご利用者負担額(3割) | 月額レンタル料金 |
|---------|-------|--------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| R-85SL  | 85    | 約4     | 28-0973-1 | 00532-000022 | 円           | 円           | 円           | 円        |
| R-125SL | 125   | 約5     | 28-0974-1 | 00532-000021 | 円           | 円           | 円           | 円        |
| R-165SL | 165   | 約7     | 28-0975-1 | 00532-000020 | 円           | 円           | 円           | 円        |
| R-205SL | 205   | 約9     | 28-0976-1 | 00532-000019 | 円           | 円           | 円           | 円        |
| R-245SL | 245   | 約11    | 28-0977-1 | 00532-000018 | 円           | 円           | 円           | 円        |
| R-285SL | 285   | 約13    | 28-0972-1 | 00532-000017 | 円           | 円           | 円           | 円        |

## エコ段差スロープN

マツ六

置くだけで「つまずき」の原因の  
段差を解消!

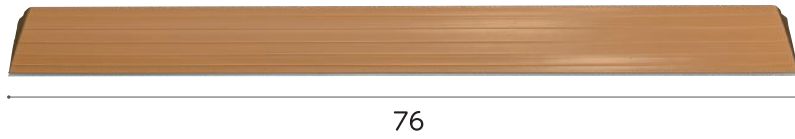

| 商品名 | 高さ (cm) | 奥行 (cm) | 重さ (kg) | 商品番号      | 商品コード        | ご利用者負担額(1割) | ご利用者負担額(2割) | ご利用者負担額(3割) | 月額レンタル料金 |
|-----|---------|---------|---------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 10N | 1       | 4       | 0.2     | 28-1030-1 | 01265-000120 | 円           | 円           | 円           | 円        |
| 14N | 1.4     | 6       | 0.3     | 28-1016-1 | 01265-000095 | 円           | 円           | 円           | 円        |
| 20N | 2       | 8       | 0.6     | 28-1017-1 | 01265-000096 | 円           | 円           | 円           | 円        |
| 25N | 2.5     | 10      | 1       | 28-1018-1 | 01265-000097 | 円           | 円           | 円           | 円        |
| 30N | 3       | 12      | 1.3     | 28-1019-1 | 01265-000098 | 円           | 円           | 円           | 円        |
| 35N | 3.5     | 14      | 1.9     | 28-1026-1 | 01265-000116 | 円           | 円           | 円           | 円        |
| 40N | 4       | 16      | 2.3     | 28-1027-1 | 01265-000117 | 円           | 円           | 円           | 円        |
| 45N | 4.5     | 18      | 2.9     | 28-1028-1 | 01265-000118 | 円           | 円           | 円           | 円        |
| 50N | 5       | 20      | 3.6     | 28-1029-1 | 01265-000119 | 円           | 円           | 円           | 円        |
| 55N | 5.5     | 22      | 4.7     | 28-1031-1 | 01265-000121 | 円           | 円           | 円           | 円        |
| 60N | 6       | 24      | 5.7     | 28-1032-1 | 01265-000122 | 円           | 円           | 円           | 円        |

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品


## 安心のご提案

対応段差 全11タイプで室内の段差に幅広く対応します!

滑りにくく、足にソフトな素材




端部は安心のラウンド加工

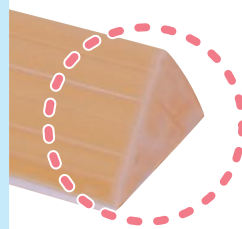

車椅子や歩行者が  
側面からアプローチしても  
ラウンド加工されているので  
安心です。


安心のずれ防止仕様

置くだけでずれにくい  
特殊仕様

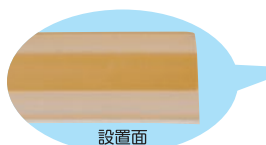

勾配は全タイプ14°

**断面図** ※敷居にピッタリと付けてください。

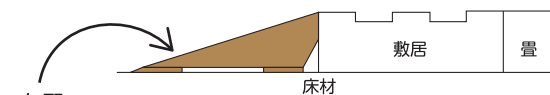

車椅子での段差越えや歩行での  
つまずき防止に安心です。

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報